


LED Leiste oben
Darstellung

Training

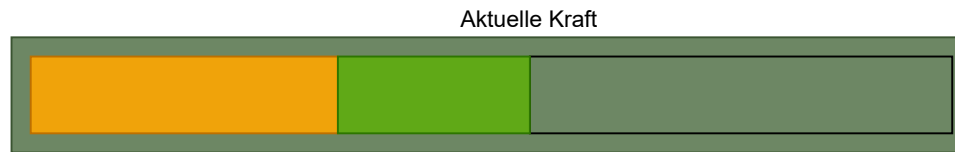

Kraft unter Zielwert

Isotonisch: Roboter bewegt sich
entgegen der Kraft
Beinpresse: auf Trainierenden zu
Rudern: vom Trainierenden weg


Isokinematisch: Roboter steht still

Kraft über Zielwert

Isokinematisch: Roboter bewegt sich
mit konstanter Geschwindigkeit

Isotonisch: Roboter bewegt sich
in Krafrichtung
Beinpresse: vom Trainierenden weg
Rudern: auf den Trainierenden zu

Krafttest

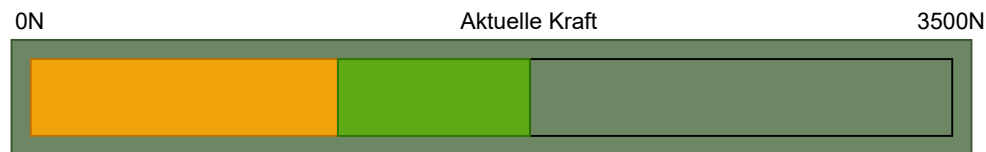

Pause




Pause

Zuerst sind alle LEDs auf weiß
geschaltet, diese werden dann
von links beginnend blau.

LED Leiste oben
Grenzwerte

Pufferzone
Isokinematisch

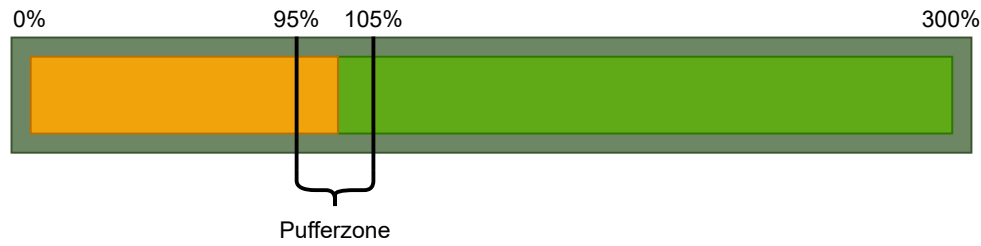


Pufferzonen

Isokinematisch: Der Roboter ändert seinen Bewegungsablauf nur, wenn der entferntere Wert überschritten wird.

Bsp: Kraft ist unter 95%, dann fängt die Bewegung erst an, wenn die Kraft 105% überschreitet.




Bsp: Kraft ist über 105%, dann stoppt die Bewegung erst an, wenn die Kraft 95% unterschreitet.

Schwellwert
Isotonisch

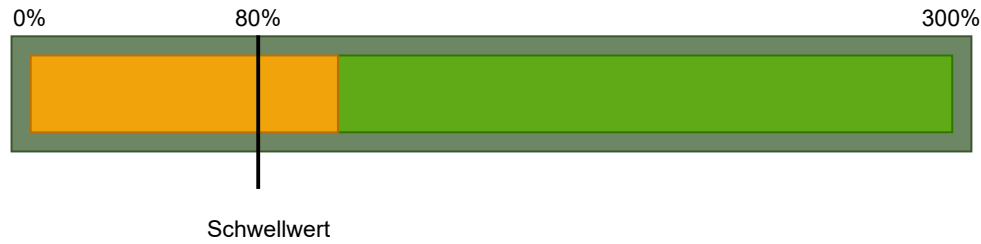

Schwellwert

Isotonisch: Die Bewegung des Roboters ist nach einem Stillstand (Start, Pause, ...) geblockt, bis einmalig mindestens 80% der eingestellten Kraft erreicht werden.

LED Leiste Links		
keine Freigabe gedrückt	Freigabe gedrückt	Bewegung entlang Trajektorie
		 dem Patienten am nächsten Ende der Trajektorier Aktuelle Position vom Patienten entferntes Ende der Trajektorie

LED Leiste Rechts					
keine Freigabe gedrückt	Freigabe gedrückt	keine Toolidentifikation	Tool: Beimpresse	Tool: Rudern	Tool: Knieextension
